


SAY SKIN

AURORA-me

세이스킨 오로라미 간편사용설명서

전원켜기/레벨조정

전원켜기/끄기

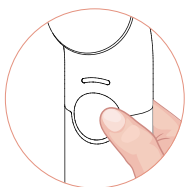

전원/레벨 버튼을
2초간 길게 누르세요.

레벨선택

전원/레벨 버튼을
2초간 길게 누르세요.
누를 때마다 레벨이 올라갑니다.
3단계에서 한번 더 누르면
다시 1단계로 되돌아 갑니다.

- 레벨 1단계 ▶ 흰색
- 레벨 2단계 ▶ 주황색
- 레벨 3단계 ▶ 빨강색

사용방법

STEP
01.



세안 후 피부를 정돈해 주세요.

STEP
02.



세이스킨 수퍼 모이스처
크림을 발라주세요.
(다른 크림을 사용해도 괜찮습니다.
해당 화장품의 유효성분 흡수를
촉진시켜줍니다.)

STEP
03.



원하는 부위를 피부결에 따라
아래에서 위로 피부에 스캔하듯이
사용해 주세요.