

SAY SKIN
AURORA⁺

Simple Manual

SAY SKIN
AURORA⁺

SAY SKIN 세이스킨은
고품격 피부를 지향하는
프리미엄 뷰티 케어 디바이스 브랜드입니다.



세이스킨 오로라 플러스

고객센터 : 1661-6987

Copyright ©2019 Withnix Co., Ltd. All Rights Reserved

MADE IN KOREA

Stay beautiful forever with SAY SKIN
세이스킨 오로라 플러스 간편사용설명서

전원켜기/레벨조정



전원버튼을 길게 누르세요.

전원켜기/끄기



레벨 버튼을 짧게 누르세요.
누를 때마다 한단계 더 높은
레벨로 올라갑니다.

레벨선택

3단계에서 누르면
다시 1단계로 돌아갑니다.

사용방법

STEP
01.




세안 후 피부를 정돈해 주세요.

STEP
02.



세이스킨 화장품을 발라주세요.

STEP
03.

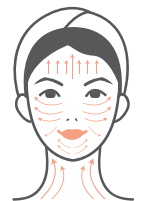


원하는 부위를 피부결에 따라
아래에서 위로 피부에 스캔하듯이
사용해 주세요.

충전방법



● 완전 충전 시간 : 약 2시간

◎ 완전 충전 후 사용시간 : 약 1시간 30분

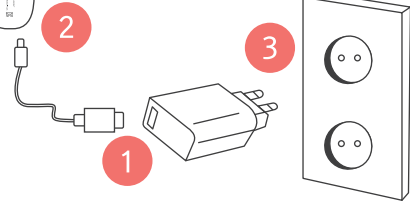

1. USB케이블(C타입)을 충전 어댑터에 연결하세요. → 예시그림 1.
2. 본 기기 본체에 USB 케이블(C타입)을 연결하세요. → 예시그림 2.
3. 충전 어댑터의 플러그를 콘센트에 꽂으세요. → 예시그림 3.

안전을 위한 주의사항

▶ 다음과 같은 증상의 환자나 아래 사항에 해당하는 분은
전문의와 상담 후 사용하십시오.

- 피부 발진이나 과도하게 따끔거리는 경우
- 여드름 부위가 깊어 염증이 있는 경우
- 알레르기 체질로서 피부가 유난히 민감한 분
- 임신부, 생리 중인 분, 통원 중인 분 등 건강상 주의가 필요한 분
- 호르몬제를 복용 중이신 분

▶ 다음과 같은 의료기 사용자는 본 기기를 사용하지 않습니다.

- 심장박동 보조기 등 체내에 직접 착용하는 전자의료기 사용자
- 인공심폐기 등의 생명유지용 전자의료기 사용자
- 심전도 기기 등의 장착형 전자의료기 사용자

[민감성피부 참고사항] 민감성 피부를 가진 분이 사용하실 때에는
약간의 접촉성 트러블 증상이 생길 수 있습니다.

이런 증상이 나타나면 2~3일 일시 중단하신 후 재사용 하십시오.

※ 본 기기는 피부미용기기로 의료기기가 아니며, 제품 기능과 관련하여
마음적인 효과 외 어떠한 의학적 효능효과도 제공하지 않습니다.